


Genießen Sie die Freiheit und die Flexibilität einer natürlichen Handgelenksbewegung



Merkmale:

- Geschmeidige & natürliche Bewegung, die die Erledigung täglicher Aufgaben unterstützt
- Ermöglicht die Absorption von Erschütterungen, Stößen und Torsionskräften
- Verriegeln und Entriegeln des Handgelenks durch einen einfachen magnetischen Verschluss
- Einfache Handhabung vor allem für bilaterale Patienten vorteilhaft
- In schwarz und neutraler Farbe erhältlich, um sich der Farbe der **i-limb™** Hand anzupassen

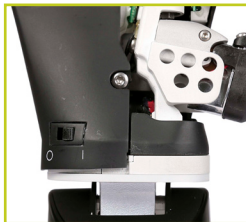

Verriegeln Sie die **flexion wrist**, um die Handposition der **i-limb™** bei +40°, +20°, 0°, -20°, -40° Grad zu fixieren.



Entriegeln Sie die **flexion wrist** für eine gefederte Flexibilität des Gelenks, welches von +40° bis -40° Grad reicht.



Das Verriegeln der **flexion wrist** bietet in den verschiedenen Positionen eine exakte Positionierung der Hand während der Ausübung funktioneller Tätigkeiten, wie z.B. beim:


- Schreiben
- Haare bürsten
- Tippen an der Tastatur
- Benutzen von Koch- und Essutensilien
- Befestigen der Kleidung
- Manipulieren kleiner Objekte

Das Entriegeln der **flexion wrist** ermöglicht eine exakte Positionierung der Hand während der Ausübung funktioneller Tätigkeiten, wie z.B. beim:

- Fegen
- Säubern von Tischplatten
- Schieben des Einkaufswagens
- Öffnen von Türen
- Stabilisieren von Objekten während der Zubereitung von Speisen

flexion wrist

Alle Längen sind in mm

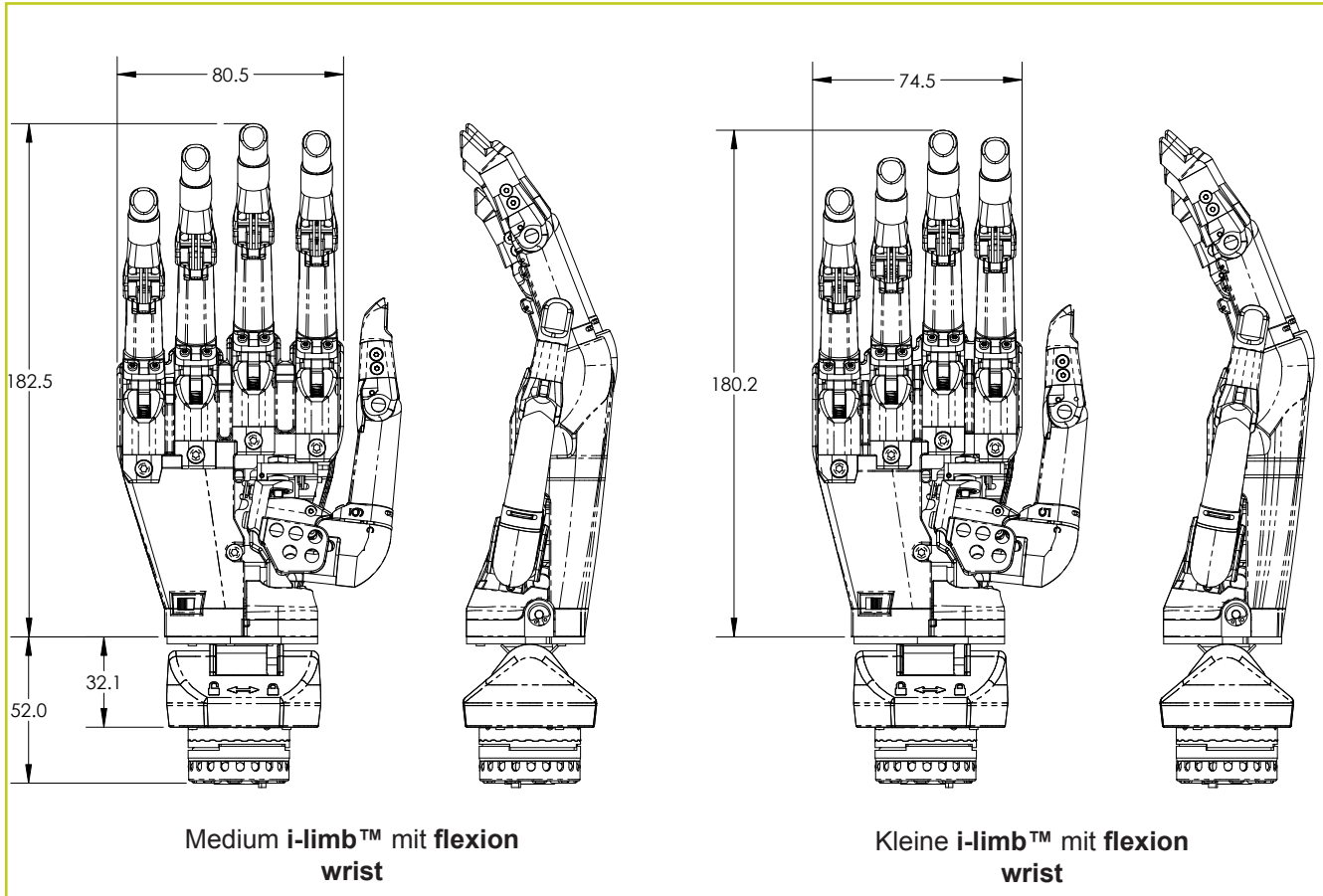

Technische Informationen

flexion wrist Gewicht	161g
Bewegungsspanne (entriegelt)	+40° bis -40°
verriegelte Position	+40°, +20°, 0°, -20°, -40°

Produktnummer	Standardhand
PL270001	i-limb ultra revolution flexion wrist Medium RH Neutral
PL271001	i-limb ultra revolution flexion wrist Medium LH Neutral
PL272001	i-limb ultra revolution flexion wrist Klein RH Neutral
PL273001	i-limb ultra revolution flexion wrist Klein LH Neutral
PL274001	i-limb ultra revolution flexion wrist Medium RH Schwarz
PL275001	i-limb ultra revolution flexion wrist Medium LH Schwarz
PL276001	i-limb ultra revolution flexion wrist Klein RH Schwarz
PL277001	i-limb ultra revolution flexion wrist Klein LH Schwarz

Produktnummer	Standardhand
PL206001	i-limb ultra flexion wrist Medium RH Neutral
PL207001	i-limb ultra flexion wrist Medium LH Neutral
PL208001	i-limb ultra flexion wrist Klein RH Neutral
PL209001	i-limb ultra flexion wrist Klein LH Neutral
PL210001	i-limb ultra flexion wrist Medium RH Schwarz
PL211001	i-limb ultra flexion wrist Medium LH Schwarz
PL212001	i-limb ultra flexion wrist Klein RH Schwarz
PL213001	i-limb ultra flexion wrist Klein LH Schwarz